


CHIRURGIA GUIDATA

# KIT GSL GUIDED SINUS LIFT

La chirurgia guidata semplice e veloce

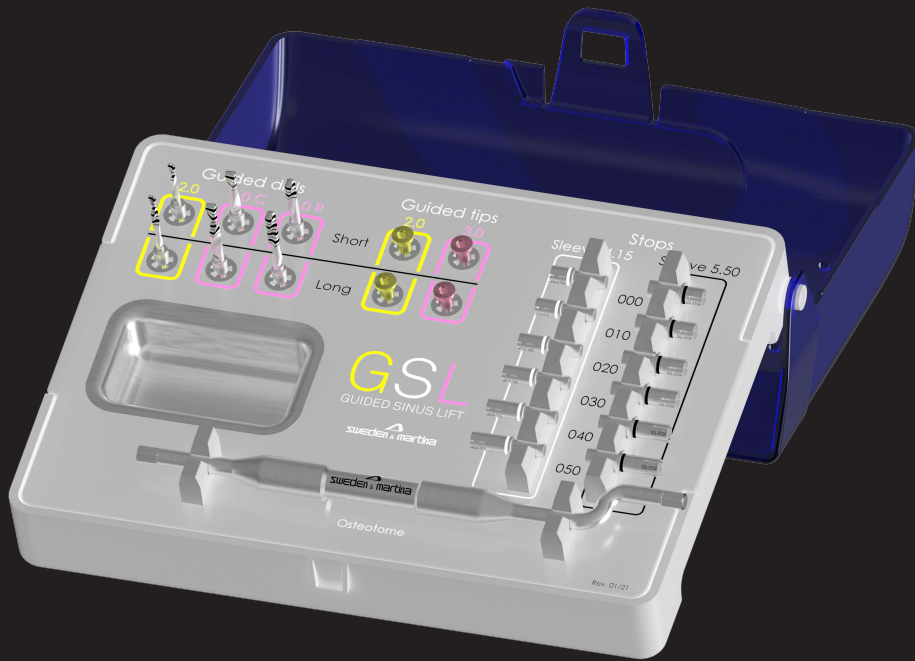

Kit compatto per un'operatività più semplice ed economica

# DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Il **Kit GSL** è un sistema che consente di rialzare in modo minimamente invasivo e graduale il seno mascellare fino ad un'altezza di 12 mm oltre la situazione iniziale, con una tecnica semplice, rapida e sicura, effettuata in chirurgia guidata e in tecnica mista. Il piegamento della corticale ed il superamento della fase di deformazione elastica sino alla rottura della stessa per poter inserire un biomateriale ricostruttivo e l'impianto, vengono garantiti con passaggi gradualmente, atraumatici, step by step (1 mm cadauno), mediante stop di profondità.

Gli **strumenti contenuti nel kit GSL** sono i seguenti:

- 6 frese, in diversi disegni;
- 12 stop di profondità;
- 4 guided tips di diverse misure
- 1 strumento manuale che ha da un lato l'asse di lavoro dritto e dall'altro una "L" che permette di operare più agevolmente anche in casi di ridotta apertura;
- 1 box porta-strumenti autoclavabile con un tray interno.

## Frese cilindriche



## Frese chamfered




## Frese rounded



## Guided tips



## Stop

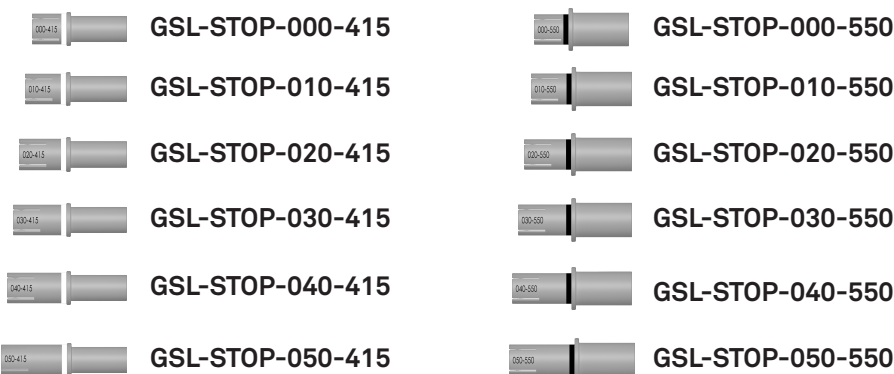

## Manico

